



Jakobsen**RED** Phoenix MINI 40

Használati Útmutató

Jakobsen**RED**


Multi-hullámhosszos vörös fényterápia

6 hullámhosszal

A legjobb Önmagad!



Köszönöm a vásárlást. Üdvözlöm a vörös fény világában. Őszintén örülök, hogy csatlakozott hozzánk, és hamarosan személyesen is megtapasztalhatja a vörös és közeli infravörös fény előnyeit.

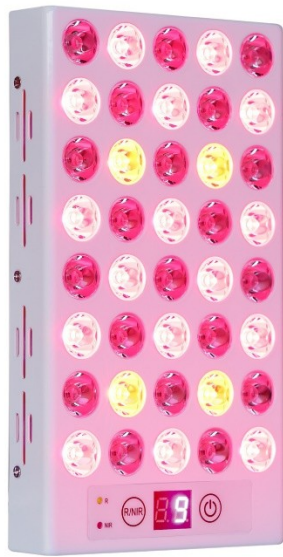

A CSOMAG TARTALMA

- 1x vörös fény panel
- 1 x csatlakozó tápkábel
- 1 x védőszemüveg

A PANEL KEZELÉSE:

Kérem bekapcsolás előtt távolítsa el gondosan az összes csomagolást és győződjön meg róla, hogy panelje nem sérült, és tartalmazza az összes alkatrészt. Ellenkező esetben NE használja a lámpát, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy helytelen használatból eredő károkért

1. LÉPÉS



Csatlakoztassa a tápkábelt a lámpa hátuljához, majd dugja be a konnektorba.

2. LÉPÉS



Nyomja meg a készüléken a jobb oldali gombot a bekapcsoláshoz.

3.LÉPÉS



Nyomja meg az R / NIR gombot a megfelelő mód (fény) bekapcsolásához.

Három opció lehetséges: csak a vörös fény használata, csak a közeli infravörös fény alkalmazása (láthatatlan), avagy mindkettő spektrum együttes használata. **A maximális hatás elérésének érdekében a két fény együttes alkalmazása a javasolt, mivel szinergikusan hatnak egymásra. A hosszabb hullámhosszok felerősítik a rövidebb hullámhosszok hatását.**

4. LÉPÉS



Kapcsolja be a lámpát a jobb oldali gombbal.

A CSOMAG TARTALMA

1x vörös fény panel
1 x csatlakozó tápkábel
1 x védőszemüveg

A PANEL KEZELÉSE:

Kérem bekapcsolás előtt távolítsa el gondosan az összes csomagolást és győződjön meg róla, hogy panelje nem sérült, és tartalmazza az összes alkatrészt. Ellenkező esetben NE használja a lámpát, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy helytelen használatból eredő károkért.

A PANEL ALKALMAZÁSÁHOZ FONTOS TUDNIVALÓK

Teljesen meztelenül használja a készüléket, a paneltől 10 -30 cm távolságban alkalmanként 10 – 20 percig, tapasztalja meg Önnek hogy esik jól. Mindig **csukott szemmel alkalmazza a fényt!**

SOHA NE NÉZZEN KÖZVETLEN A VÖRÖS FÉNYBE!

Védőszemüveget mindig viseljen, amennyiben szeme érzékeny, vagy este használja a fényt.

Kétség esetén beszélje meg kezelőorvosával a védőszemüveg használatát.

Az ajánlott használat a heti 4-6 alkalom. Heti egy napot hagyjunk ki.

A fénytől való rövidebb távolság esetén kevesebb időre van szükség az megvilágításhoz, ha távolabb áll hosszabb ideig használja a készüléket.

Ideálisan 15 perc 20-30 cm-ről. Kellemetlen érzet esetén test bármely részén, 10 – 15 cm-ről használja a fényt 10 percre. Amennyiben melegnek érzi a lámpát, álljon messzebb tőle! Ha irritálja a bőrét azonnal kapcsolja le a lámpát, és a legközelebbi használatkor tartson nagyobb távolságot a készüléktől.

A paneltől való távolság mindig az egyén fényérzékenységtől függ. Ezt Önnek kell kitapasztalnia milyen távolságból, mennyi ideig kellemes a fent megadott ajánlások alapján használnia a paneljét.

Tanácsos a szervezetünk lassú hozzászoktatása a vörös fényhez. Ami azt jelenti, hogy a megajánlott legnagyobb távolságaról kezdjük a kezelést körülbelül 5 percre az első pár napban. Majd picit növeljük a távolságot pár naponként, míg a fent említett távolságokkal elérjük a 10-20 perces kezeléseket.

Mikor már hozzászokott a szervezetünk a vörös fényhez, akkor menjünk lassan picit közelebb a lámpához.

Az ideális távolság, egyéni érzékenységet figyelembe véve 15 perc 20 cm-ről.

Amennyiben túl melegnek érzi a lámpát álljon távolabb!

Kellemetlen testi érzetek megvilágítására szeretné használni a lámpát, a minimális megajánlott távolságig lehet közel menni, azaz 10 cm-ről ideálisan 5-10 percig.

Minél közelebb megy a lámpához, egyenes arányban csökkentse az alkalmazási időt, mert a lámpa teljesítménysűrűsége annál nagyobb, jóval erősebb fényhatás éri!

Naponta maximum 30 perc vörös fény érheti a testet, ezt is el kell osztani 2-3 kezelésre. Tehát 2x15 percre, vagy 3x10 percre. Illetve a két kezelés közt ajánljuk 6 óra teljen el!

Soha NE használja egy alkalommal 20 percnél hosszabb ideig a panelt!

Egyes gyógyszerek fényérzékenységet okoznak. Amennyiben allergiás reakciót tapasztal vagy túlérzékenységet a megvilágítást azonnal le kell állítani.

Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy alkoholt fogyasztott, illetve, ha fennáll az elalvás veszélye!

A TÚL HOSSZÚ IDEIG TARTÓ MEGVILÁGÍTÁS ESETLEG A SEJTEK MEGTERHELÉSÉHEZ VEZETHET. MINDIG TARTSA BE A KEZELÉSI ÚTMUTATÓBAN AJÁNLOTTAKAT.

AMENNYIBEN FÁRADTNAK ÉRZI MAGÁT VÖRÖS FÉNYEZÉS UTÁN AKKOR TÚL SOK VÖRÖS FÉNY ÉRTE SZERVEZETÉT. (AKÁRCSAK A TÚLZOTT NAPOZÁS) KÉREM ILYEN ESETBEN NE HASZNÁLJA PÁR NAPIG A PANELT! MAJD CSÖKKENTSEN A KEZELÉSI IDŐN ÉS NÖVELJE A KEZELÉSI TÁVOLSÁGOT!

Gyermekek 3 év alatt és idős emberek felügyelet nélkül nem használhatják a készüléket!

Kérem őrizze meg a termék dobozát, mert csak az eredeti dobozban, fogadjuk el termék visszaküldését meghibásodás esetén!

A már nem szükséges csomagolóanyagot kérem mindig az előírásoknak megfelelően kezelje.

Méret: 22.5 cm x 12,5 cm x 3cm

LED szám: 40 db 3W

Teljesítménysűrűség: 132 mw/cm² 15 cm távolságra

Lencse sugárszög: 30 fok

Bemeneti feszültség: 100-240V

Hullámhosszak:

vörös fény: 630 nm, 660 nm, 670 nm

közeli infravörös fény 830 nm, 850 nm és a még ritka 810-es nanométer

digitális kijelző:

1. hullámhossz választás: Három opció lehetséges: csak a vörös fény használata, csak a közeli infravörös fény alkalmazása, avagy mindkettő spektrum együttes használata. **A maximális hatás elérésének érdekében a két fény együttes alkalmazása a javasolt, mivel szinergikusan hatnak egymásra. A hosszabb hullámhosszak felerősítik a rövidebb hullámhosszak hatását.**
2. állítható idő 1-30 percig

Pulzáló mód: használatát cégünk nem ajánlja (eredményesebb az alkalmazás nélküli)

EMF: Rendkívül alacsony nullához közeli érték.

Súly: 1.2 kg

Garancia: 3 év

Elégedettségi garancia: 60 nap

Élettartam: 50.000 óra

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A vörös fény terápia egy csodálatos dolog - de nem mindenkinek való. Néhány ok, amiért a PBM nem biztos, hogy az Ön számára megfelelő:

Olyan gyógyszert szed, amely fényérzékennyé teszi.

Migrénje vagy rohamai vannak, amelyeket erős fény vált ki.

Ön bipoláris zavarban szenved, amelyet bizonyos esetekben köztudottan befolyásol a fényhatás.

Ön terhes.

Három éves kor alatt nem használható!

Nem használhatják magatehetetlen, idős emberek, gyermekek felügyelet nélkül!

Javasolt ez esetekben az előzetes orvosi konzultáció!

Ne használja a készüléket, alkohol, kábítószer, nyugtató befolyása alatt.

Ne használja nyílt seben, ismeretlen eredetű bőrbetegség esetén.

Az vörös fénynek van néhány fantasztikus előnye és hatása, de nem mindenkinek jó.

VIGYÁZAT

Ne használja a lámpát víz közelében.

Ha víz éri a készüléket NE használja!

Ne nézzen közvetlenül a fénybe.

Használjon védőszemüveget a készülék használata közben.

Mindig húzza ki a hálózati kábelt, ha nem használja, ha a készüléket tisztítja, vagy meghibásodás, füst vagy égett szag esetén.

A dugó kihúzásakor a dugót húzza ki - ne a kábelt!

Ne használja a terméket, ha a kábel vagy a dugó sérült. Védje a kábelt a forró tárgyaktól.

Bekapcsolt állapotban ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.

Ne használja a terméket, ha a kábel vagy a dugó sérült.

Védje a kábelt a forró tárgyaktól.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A készülék kizárólag megvilágításra szolgál.

Minden más felhasználás nem tekinthető megfelelőnek.

A készülék nem alkalmazható fizikailag korlátozott személyek (beleértve a gyermekeket is) a biztonságukért felelős személyek nélkül!

A csomagolóanyagot gyermekek számára elérhetetlen helyen tartsa (fulladásveszély).

A készüléket bekapcsolt állapotban nem szabad letakarni vagy csomagolásba csomagolni.

Soha ne használja a készüléket víz közelében.

Ne használja a készüléket, ha az a földre esett, vagy extrém páratartalomnak volt kitéve, vagy

bármilyen más módon megsérült.

A készüléket nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni, és semmilyen folyadék nem kerülhet be a készülékbe.

A készüléket működés közben ne hagyja felügyelet nélkül.

Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha az meghibásodott, vagy ha a tápkábel megsérült.

Ne változtasson meg semmit a készüléken a gyártó engedélye nélkül.

Fennáll a sérülés, áramütés, tűz vagy a készülék károsodásának veszélye.

MIKOR NEM SZABAD HASZNÁLNI A KÉSZÜLÉKET?

Akut gyulladákos folyamatok esetén NE használja a fényt!

Cégünk egyáltalán nem ajánlja gyulladákos folyamatoknál a vörös fény alkalmazását, mivel a lámpa hőt bocsát ki, ami felerősítheti a gyulladákos tüneteket.

Terhes nők esetében alkalmazása csak az orvossal való konzultációt követően végezhető.

Gyermekeket csak felnőtt felügyelete mellett és az orvossal való konzultációt követően szabad megvilágítani.

Nem alkalmazható magatehetetlen személyeken, 3 év alatti gyermekeken.

Nem alkalmazható hőre érzéketlen személyeken, bőrbetegségben szenvedőknek, fájdalomcsillapítók, alkohol vagy kábítószereszedése után.

Bármilyen egészségügyi kétely esetén forduljon orvosához!

A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközökkel kapcsolatos veszélyeket. Győződjön meg arról, hogy a készüléket ne használják felügyelet nélküli gyermekek.

PANELEK KARBANTARTÁSA

Tisztítás és fertőtlenítés: A külső tisztításhoz csak puha, száraz ruhát használjon. Soha ne használjon súrolószeres tisztítószeret, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket.

TÁROLÁS

A készüléket hűvös, száraz helyen, közvetlen fénytől és extrém hőtől védve kell tárolni.

Ügyfélszolgálat

Elkötelezettek vagyunk a legjobb ügyfélszolgálat biztosítására az optimális fény élmény érdekében.

Ezért, ha bármilyen kétség merül fel Önben a panel használatával kapcsolatban, kérem ne habozzon kapcsolatba lépni velem:

tel: 0670 572 5519

e-mail info@vorosfeny.hu

Vörös fény paneljeink wellness eszközök.

A jelen termék klasszifikációja szerint általános világítási célú lámpatest, amely megfelel az EU vonatkozó termékbiztonsági előírásainak, így a 2014/35/EU LVD irányelv, a 2014/30/EU EMC irányelv és a 2011/65 EU RoHS irányelv, valamint az ezeket átültető hazai jogszabályok elvárásainak, valamint a vonatkozó harmonizált szabványok követelményeinek. A terméket a gyártó nem orvostechnikai eszköznek szánta, nem akként gyártotta, így betegségek, sérülések, patológiás állapotok diagnosztizálására, kezelésére, enyhítésére, ellensúlyozására nem alkalmas.

Feltöltve:2024.január 19.